

NEW



# element DCX

Veterinary Chemistry Analyser

Leverage sophisticated in-house chemistry with the analyser built for any practice that needs speed, ease of use and accuracy.


Our trusted dry slide and Ion Selective Electrode (ISE) technologies bring the quality of reference lab results into your clinic with unmatched savings so you can reinvest in your practice and patients. Worklisting, preloaded tips, and convenient eWrap™ panels allow you to get back to patient care sooner. Bring convenience, speed and confidence to your clinic today.

Gold Standard Dry Slide Technology

Reference Lab Quality (ISE) Electrolyte Results

Intuitive 7" Colour LCD Touchscreen

Automated Dilution

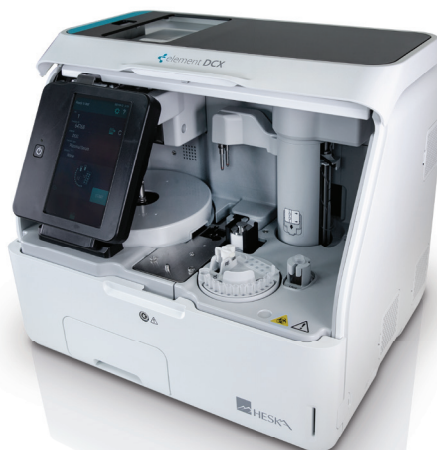

## Easy Operation Simplified 3-step Process



## Convenient



### Features:

#### High Efficiency

- Preload 12 pipette tips at once
- Fully automated dilution
- Worklisting available to simplify data entry

#### Trusted dry slide technology

- Broad and customizable test menu
- Unsurpassed accuracy and reproducibility
- Pre-packaged panels for convenience

#### Ease of Use

- Insert eWrap panel into sample rack, pull tab and go!

#### ISE electrolyte technology

- Reference lab technology on an in-house analyser
- Auto-cap feature maintains continuity of RE Solution

#### Dimensions (WxDxH)

- 18.5" x 14.2" x 14.6"  
(470 mm x 360 mm x 370 mm)

## Small Sample Size

Accommodates juvenile and exotic patients




DCX

INDIVIDUAL PARAMETERS*	Pre-Surgical eWrap	Comprehensive eWrap	Comp+ eWrap	PLUS	Liver	Kidney	Equine
ALT	•	•	•		•		
ALP	•	•	•		•		
GGT		•	•		•		•
TBIL		•	•		•		•
AST			•	•			•
BUN	•	•	•			•	•
CREA	•	•	•			•	•
PHOS		•	•			•	•
GLU	•	•	•		•		•
TP	•	•	•			•	•
ALB		•	•		•	•	•
Ca		•	•			•	•
CHOL		•	•				
Mg			•	•			
AMY			•	•			
LDH							•
LIP			•	•			
TCO <sub>2</sub>							
TRIG			•	•			
CK							•
URIC							
NH <sub>3</sub>							
Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Cl <sup>-</sup> (1 Slide)			•	•			
CALCULATED PARAMETERS							
GLOB		•	•			•	•
ALB : GLOB		•	•			•	•
BUN : CREA	•	•	•			•	•
Na : K			•	•			
Corrected Ca		•	•			•	•
Est. Osmolality		•	•				


## Intuitive multi-functional touchscreen interface:



Setup

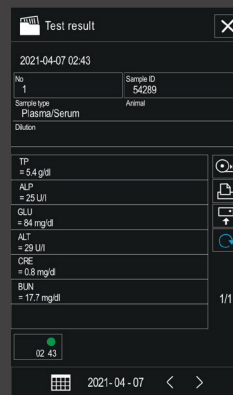

Results

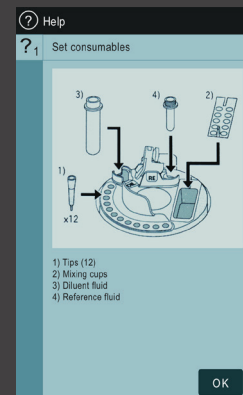

Help

### Comp+™ eWrap™ Panel

...the most convenient and encompassing in-clinic panel available.

Just load and go!



www.heska.com.au 1300 437 522

©2021 Heska Corporation. All Rights Reserved. HESKA is a registered trademark and Element DCX, Comp+, and eWrap are trademarks of Heska Corporation. FUJIFILM is a registered trademark of FUJIFILM Corporation.

\*All individual parameters are available as individual slides. Specs and appearance may be changed without notice. AU21LT0802

